



サービス保険付
1年間無料保障

■主要諸元

型式	BT40	BT4	BT30
T A I S コード	00228-000014	00228-000020	00228-000018
型式認定番号	交K10-10	交K10-24	交K10-11
機械の種類		ハンドル形電動車いす(タイプ1)	
全長×全幅×全高(mm)	1,195×650×1,065	1,090×550×1,070	1,175×650×1,055
機体重量(バッテリー除く)(kg)	107(78)	89(69)	98(70)
操舵方式		ループハンドルによる前輪操舵	
制御方式	アクセルレバーによる無段階速度制御(マイコン)		
バッテリー(5時間率)	シールド12V 32AH×2個	シールド12V 24AH×2個	シールド12V 32AH×2個
モーター(30分定格出力)	24V×390W	24V×270W	24V×390W
車輪	ノーバンクタイヤ: 前輪3.00-4、後輪:3.50-5	ノーバンクタイヤ: 前輪3.00-4、後輪:3.00-4	ノーバンクタイヤ: 前輪3.00-4、後輪:3.50-5
充電器		自動充電器内蔵(温度補正付)	
シートの寸法(mm)・構造	425(シート幅)×395(シート奥行) ×480(バックサポート高) 前後位置調整式(5cm)回転式	425(シート幅)×350(シート奥行) ×360(バックサポート高) 前後位置調整式(5cm)	425(シート幅)×395(シート奥行) ×480(バックサポート高) 前後位置調整式(5cm)回転式
最高速度(Km/h)	前進 後進	0.5~6.0無段階 0.5~2.0無段階	2.0~6.0無段階 0.6~2.0無段階
实用登坂角度(°)		10	
段差乗越高さ(mm)		80以下	90以下
溝乗り越え幅(mm)		120以下	
最小回転半径(mm)	1,460(機体最外側)	1,250(機体最外側)	1,240(機体最外側)
連続走行距離(km)	29	23	29
使用者最大体重(kg)	100(積載物含む)	75(積載物含む)	100(積載物含む)

※JIS T 9208:2009(ハンドル形電動車いす)認証を取得しています。

※連続走行距離は、平坦路を新品バッテリー満充電状態にて使用者最大体重で走行したとき、バッテリーが100%放電するまでの距離を示します。

※マイピアは、国家公安委員会の型式認定を取得しています。

■走行上の注意

- マイピアの操作に慣れるまで、広い安全な場所で十分練習してください。
- この製品は電動車いすです。それ以外の用途には使用しないでください。
- 走行中は携帯電話やトランシーバーを絶対に使用しないでください。使用する場合はメインスイッチを切ってください。また、高圧線やテレビ塔など、強い電波が出ている所での走行は避けてください。
- 次のような場所での走行は避けるか介助者に同行してもらってください。
 - 交通量の激しい道路、道幅の広い横断歩道、狭い道、踏切など
 - 砂利道、ぬかるみ、防止柵の無い側溝や路肩付近など
 - 夜間走行●雨天時、降雪時●雪道、凍結路●濃霧、強風時
- 段差および溝乗り越え時には十分ご注意ください。
- 10°以上の急坂走行や5°以上の斜め走行は転倒の恐れがありますので避けてください。
- 使用者最大体重制限は、人、手荷物を含めて「BT40・BT30」は100kg、「BT4」は75kgです。オーバーして使用しないでください。

マイピア試乗のご希望の方は、下記取扱店までご連絡ください。

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取扱店

販売店

マイピアサービス保険

●電動車いすBT40・BT4・BT30には、1年間無料のサービス保険が付きまます。ご購入時にご確認ください。
(「マイピアサービス保険」は、取扱説明書と同梱の加入ハガキをご投函された方のみ有効です。)

マイピア保険

●「マイピアサービス保険」とは別に、更に保障内容を充実した「マイピア保険」をご用意しております。(有料)
(詳しくは、取扱説明書と同梱の「マイピア保険のご案内」をご覧ください。)
※「マイピアサービス保険」「マイピア保険」は、リースまたはレンタルでご利用の方は加入できません。マイピアを個人購入された方のみ、この保険に加入できます。

※本機を安全に使っていただくために、本機には ▲危険 ▲警告 ▲注意 の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。
※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

豊かさを創造し、未来へ挑戦する
株式会社アテックス

- 本 社 〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5
TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業本部直通)
ホームページ <http://www.atexnet.co.jp>
E-mail: atexhome@atexnet.co.jp
- 東北営業所 〒028-3621 岩手県紫波郡矢町広宮沢第11地割北川505-1
TEL(019)697-0220(代) FAX(019)697-0221
- 関東支店 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋6633
TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中部営業所 〒503-0931 岐阜県大垣市本今5-128
TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- 中四国支店 〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5
TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
- 九州営業所 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水1262-1
TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
- 部品センター 〒799-2655 愛媛県松山市馬木町899-6
TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

atex

電動車いす



お出かけ、まじょー!




運転免許不要

BT40

4輪タイプ

安心と安全を考え、充実の機能を装備しました!

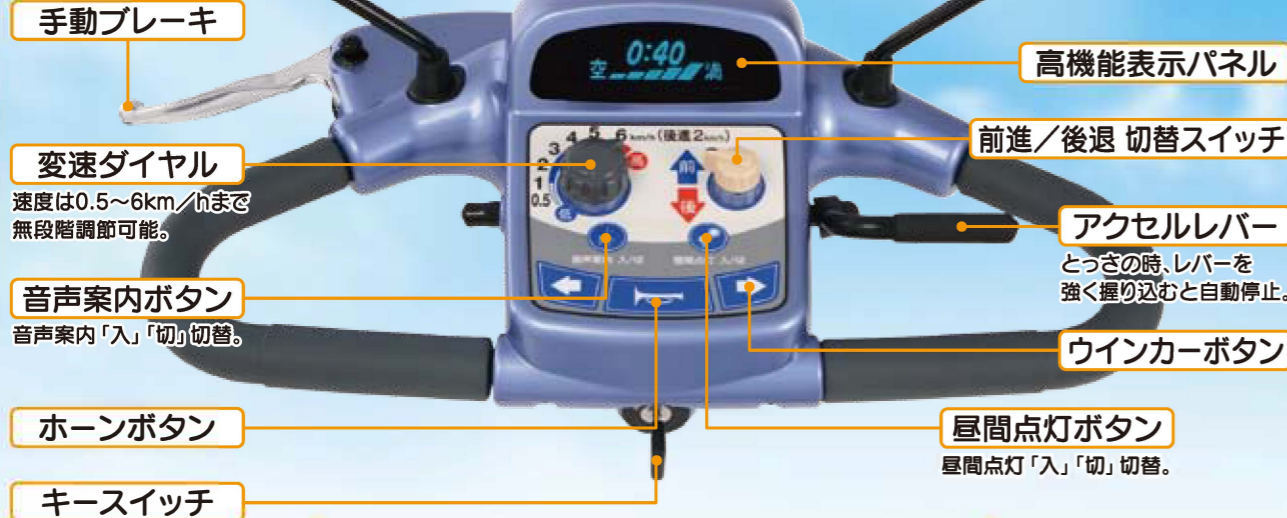

お助けボイス機能

「急な上り坂です...」「充電してください...」など、多数の音声案内を用意しております。



BT40S(シルバー)



BT40B(ブルー)

安定感があり安心の4輪タイプは2種類のカラバリエーション。お好みでお選びください。

ユニバーサルデザイン採用製品です。

高機能表示パネル

大きく見やすい表示パネルで様々な情報を確認できます。

- バッテリー残量
- 時刻表示
- 充電状況
- 注意の呼びかけ 等



快適

●コーナー減速機能

コーナーを曲がる時、自動的にスピードを減速。安全に曲がりきることができます。



●超低速モード

0.5km/hの超低速走行で狭い道や車庫入れも楽々。



●四輪サスペンション

走行中の振動・衝撃をしなやかに吸収。凸凹道もソフトな乗り心地。

安心

●大型ヘッドライト&LEDリヤランプ

昼間点灯機能付きのヘッドライトと視認性の高いLEDライトを装備。



●盗難抑止機能装備

駐車中にハンドルを動作させると警報を鳴らし、いたずらや盗難を抑止します。



●ノーパンクタイヤ

パンクの心配がなくお出かけできます。

便利

●フロントポケット&お買物フック

大きな荷物は手元に収納。袋を掛けられる便利なフック付き。



●楽々充電

家庭用100Vコンセントにプラグを差し込むだけ。充電が終わると自動停止。



●回転シート

シートが回転するので乗り降りが楽々。

BT4 スマート 4輪タイプ

市街地の脚として、マンションでも大活躍のスマート仕様!



お助けボイス機能 高性能表示パネル



新製品

「スマート」をコンセプトに
扱いやすさを追求! マイピアに
新しい仲間が加わりました。

ユニバーサルデザイン採用製品です。

コンパクトで扱いやすい設計!
マンションのエレベーターや玄関口の出し入れ、スーパー等への買い物にも便利です。

全長 1,090mm
全幅 550mm

BT40との大きさを比較
全長の差105mm
全幅の差100mm

BT40との最小回転半径を比較
回転半径の差210mm

BT4 1,250mm
BT40 1,460mm
(機体最外側)

快適

快適性能はBT40と
同じ内容です。

●コーナー減速機能
コーナーを曲がる時、自動的にスピードを減速。
安全に曲がりきることができます。

●超低速モード
0.5km/hの超低速走行で狭い
道や車庫入れも楽々。

●四輪サスペンション
走行中の振動・衝撃をしなやかに
吸収。凸凹道もソフトな乗り心地。

安心

●大型ヘッドライト&LEDリヤランプ
昼間点灯機能付きのヘッドライトと視認性の高い
LEDライトを装備。

●盗難抑止機能装備
駐車中にハンドルを動作させると
警報を鳴らし、いたずらや盗難を
抑止します。

●ノーパンクタイヤ
パンクの心配がなく
お出かけできます。



便利

●お買物フック
袋を掛けられる便利なフック付き。

●楽々充電
ハンドルポストに装備!
家庭用100Vコンセントにプラグ
を差し込むだけ。
充電が終わると自動停止。



BT30

3輪タイプ

小回りのきく3輪タイプも人気です。

お助けボイス機能

音声案内ボタン
音声案内「入」「切」切替。

手動ブレーキ

変速ダイヤル
速度は2~6km/hまで
無段階調節可能。

ホーンボタン

キースイッチ

バッテリーメーター

前進/後退 切替スイッチ

アクセルレバー

とっさの時、レバーを
強く握り込むと自動停止。

ウインカーボタン

ハンドル連動
ヘッドライト
進行方向を明るく
照らします。

回転式シート
乗り降り楽々。
肘掛け跳ね上げ式。
前後位置調節可能。
(50mm)

反射板
横や後ろからの被視
認性を向上し安心。



BT30B(ブルー)

シンプルなデザインで
取り回しが楽な3輪
タイプも人気です。

マイピアで出掛けませんか!

実際にご利用いただいている
お客様の声です。

静かで安定感抜群!

田舎に
住んでいて坂道が多いのですが、
問題無くスイスイ走ってくれます。
(山口市 F様)

73才から
乗り始め、グランドゴルフの
練習の往復に使用しています!
(福岡市 K様)

こんなに便利で
カンタン操作!

買い物に
行っても、荷物がたくさん
積めるので便利です。
(広島市 A様)

性能が良くて
故障知らず。

マイピア
シリーズを17年間乗っています。
大変調子が良く、今回で3台目です。
(仙台市 Y様)

ボイス機能で分かりやすい。

音声案内を
してくれるので、ウインカーの
消し忘れや押し間違いが無いです。
(高知市 E様)

カーブで
車速が自動的に落ちるので
とっても安全です。
(東京都 D様)

マイピア オプション

もっと使いやすく、
安全にご利用いただくために。

BT40
(オプション装備車)



杖立て(S)SET
[TAISコード:00228-000017]



Fバスケット(S)SET
[TAISコード:00228-000016]



リヤバッグSET
[TAISコード:00228-000015]

確認申請を必要とする
オプション



松葉杖ラックSET



フロアマット
BT30専用



車体カバー
[TAISコード:00228-000012]



バックミラー(107)SET
[TAISコード:00228-000012]



補助車輪(30)SET
BT30専用

オプション品	価格	コードNo	BT40	BT4	BT30
杖立て(S)SET		0775-741-200-1	●	●	●
Fバスケット(S)SET		0775-731-200-1	●		
リヤバッグSET		0775-721-200-4	●		●
フロアマット		0773-790-211-0			●
車体カバー		0771-761-011-1	●	●	●
松葉杖ラック(40)SET		0773-750-200-0	●		
松葉杖ラック(30)SET		0773-765-300-0			●
補助車輪(30)SET		0773-780-400-0			●
バックミラー(107)SET		0762-711-200-0		●	

ご注文の際は、上記コードNo.をお伝えください。

注意

道路交通法施行規則のご理解、
ご協力をお願いいたします。

改造したりオプション品を取り付けること
により、道路法施行規則基準を超えるもの
は歩行者としてみなされません。基準は長
さ120cm、幅70cm、高さ109cmを超え
ないこととなっています。身体的状況等
によりやむを得ない場合は、必要書類を添付
した上で、確認申請をして所轄警察の許可
を得てからご使用ください。